


WAS Multi-Load Assist – Assistance au chargement pour chariots-brancards.

BREVE DESCRIPTION

L'assistance au chargement pour chariots-brancards a été développée pour soulager aussi bien les patients que les secouristes. Les secouristes n'ont plus d'efforts à fournir pour charger le chariot-brancard avec le patient dans la cellule sanitaire. Ils amènent le brancard jusqu'en position de chargement et fixent ce dernier sur le système pour activer ensuite l'assistance au chargement. Une commande spéciale amène le chariot-brancard sur le support-brancard, ceci en douceur et sans vibrations. Le brancard est verrouillé automatiquement sur le support-brancard. Le système Multi-Load représente un autre avantage considérable : Il est compatible avec tous les systèmes de chariotsbrancard courants en Allemagne. De plus, WAS Multi-Load peut être installé ultérieurement sur tous supports brancards resp. tables d'ambulance modèle Hydropuls Comfort. Pour les secouristes, cette innovation de WAS représente un soulagement du dos. Pour les patients, c'est moins stressant car le chargement du chariot-brancard se fait en douceur, sans bruit et sans à-coups.

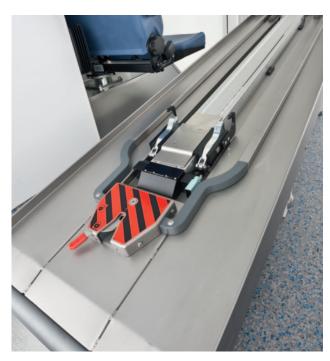

Grâce à sa conception bien étudiée, WAS Multi-Load Assist est compatible avec tous les systèmes de chariots-brancards courants en Allemagne.



WAS Multi-Load Assist est activé après que le chariot-brancard a été fixé sur le système de chargement.



Le verrouillage sur le support-brancard se fait automatiquement.



Verrouillage fiable du système de chargement.

WA5® Making vehicles special

WAS Door Assist – Réduction de bruit avec système.

BREVE DESCRIPTION


Afin de rendre la cellule sanitaire plus silencieuse et ainsi moins stressant pour les patients, WAS a étudié plusieurs conceptions. Le nouveau système WAS Door Assist assure la fermeture silencieuse de l'ensemble des portes de l'aménagement cellule. Au lieu de claquer les portes, ce qui ne se fait pas sans bruit, le secouriste accompagne la porte jusqu'au premier engagement du système de fermeture. Ensuite la porte se rétracte automatiquement dans les joints, ceci sans bruit et sans vibrations. Les portes sont correctement verrouillées et ne peuvent plus se dégager de la serrure.



Avec sa fermeture silencieuse et en toute sécurité, WAS Door Assist réduit le stress au patient.



Après un premier engagement du système de fermeture, la porte se rétracte automatiquement dans les joints : c'est silencieux et sans vibrations !

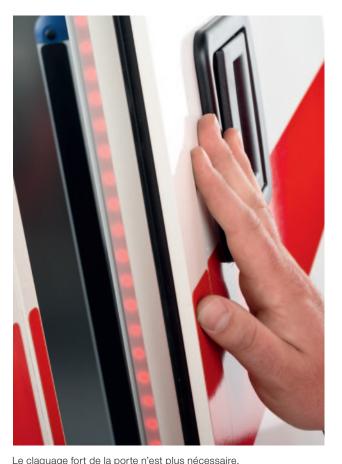

Le secouriste n'a plus que diriger la porte dans la bonne position.

WAS France SARL | 20 avenue des Frères Montgolfier | 69680 Chassieu | France Tél. +33(0) 4 78 49 91 67 | Fax +33(0) 4 78 49 98 43 | contact@was.fr | www.was.fr

