



Making vehicles special

Rettungswagen: Der neue WAS 500.




Der neue WAS 500: Technologie und Design auf höchstem Niveau.



KURZBESCHREIBUNG

Ob im täglichen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen oder als VIP-Transporter: Dieser WAS 500 RTW setzt weltweit Standards mit modernster Ausstattung, z. B. 360°-Warnleuchte und elektronischer Sirene, einer speziell für Heißbländer ausgelegten Kofferkonstruktion, einem Kompressorkühlschrank, langlebigen und leichten Möbelmaterialien, die desinfektionsmittelresistent und nicht brennbar sind sowie einem komfortablen Ambulanztisch. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 5 t ist der kompakte, aerodynamische Fahrzeugaufbau so konzipiert, dass er nicht über die Fahrzeugbreite hinausragt und sich im dichten Straßenverkehr und in engen Gassen wie ein Kastenwagen verhält.

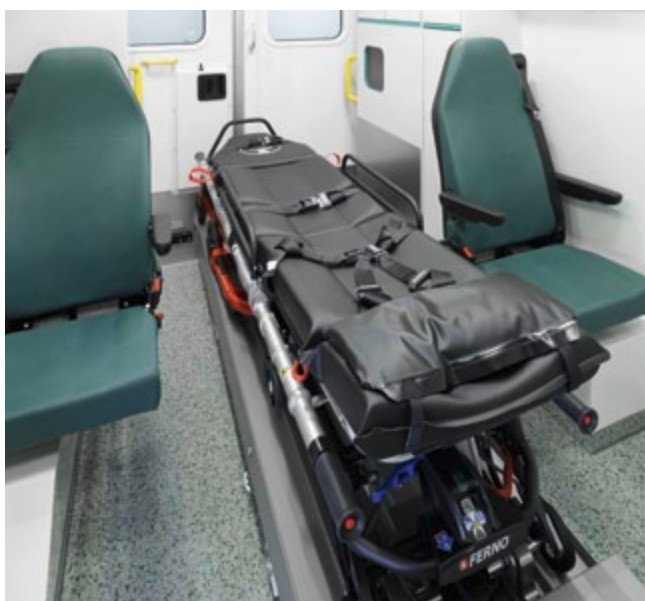

Für maximale Bewegungsfreiheit können die Begleiterstühle einfach hochgeklappt werden.

AUSSENAUSSTATTUNG

Schiebetür rechts sowie Zugangsklappe für einfachen Zugriff auf Notfalltaschen und Luftkompressor

Zugangsklappe für einfachen Zugriff auf Wirbelbrett, Schaufeltrage, Vakuummatratze und Tragestuhl

Zwei große Heckflügeltüren, auf 270° arretierbar, zur Vermeidung von Unfällen in dichtem Straßenverkehr

Zugangsklappe hinten links für stationäre Sauerstoffversorgung

Zusätzliches Unterflurstaufach für Werkzeug usw.

Dachluke in der Decke, dient auch als Notausstieg

LED-Blitzer an Koffer- und Seitenwand, als Kotflügelblitzer und Frontblitzer

Integrierte 360°-Warnanlage in modernster LED-Technologie, für optimale Sichtbarkeit bei energiesparender Aerodynamik

LED-Arbeitsscheinwerfer am gesamten Kofferaufbau

Elektrische Warnanlage und Sirene mit Drucklufthorn

Solarlüfter, bei intensiver Sonneneinstrahlung und bei ausgeschalteter Klimaanlage

Rückfahrkamera

Drei unabhängig voneinander steuerbare Klimaanlage mit eigenem Kompressor für Fahrerraum, Patientenraum und bei stehendem Fahrzeug



Der Innenausbau ist besonders strapazierfähig und wartungsarm.



Das WAS SanSafe System beseitigt Krankheitserreger und Keime, selbst an schwer zugänglichen Stellen.

INNENAUSSTATTUNG

Hocheffiziente LED-Innenbeleuchtung mit blauem Traumalicht

WAS SanSafe System: Vernebelungssystem mit H₂O₂, Wasserstoff-Peroxid (100 % Sicherheit z. B. bei Ebola, MERS, SARS, Lassafieber)

WAS elektrohydraulischer Tisch mit Einzugssystem

WAS Multi-Load Assist:

- Schock- und Antischockposition
- Höhenverstellbar
- Transportmodus/Federung
- CPR-Modus
- Seitliche Verschiebung sorgt für genügend Platz und eine optimale Behandlung des Patienten
- Einzugshilfe zum sanften und rückenschonenden Beladen des Patienten

Stationäre Sauerstoffversorgung mit automatischer Umschalteneinheit

Computergestütztes Fahrzeugmanagement auf CAN-Bus-Basis

230-V-Sinus-Wechselrichter

Infusionshaken im Deckcenter integriert

Zentrales Touchpanel für elektrohydraulischen Tisch, Klimaanlage, Warnanlage und Beleuchtung

TRENNWAND

Staufach für Notfalltaschen oder -rucksäcke, von innen und außen zugänglich

7-l-Kompressorkühlschrank

Arztstuhl mit Dreipunktgurt und Vorwärts-/Rückwärtsverschiebung. Zusätzlicher Kinder-Vierpunktgurt mit ISOFIX-Kindersicherung integriert in den Arztstuhl

Schubladenblock mit 5 Schubladen

2 Auszüge für Kleinmaterial

Hängeschrank

LINKE SEITENWAND

Stauraum für Medizintechnik

Hängeschrank

Begleitersitz (dreh- und klappbar) mit Dreipunktgurt

Zentrales Touchpanel

Gegensprechanlage zum Fahrer

Sauerstoff- und Stromanschlüsse (12 V und 230 V)

White Board

RECHTE SEITENWAND

Begleitersitz (dreh- und klappbar) mit Dreipunktgurt

Fenster mit getönter Scheibe und Jalousie zur Wahrung der Privatsphäre, dient als Notausstieg

DECKE

Deckcenter mit:

- Arztspot
- Infusionshaken
- Haltestangen
- Sauerstoffsteckdose
- Inkubatorsteckdose

FAHRERRAUM

Mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz

Zentrales Touchpanel für alle notwendigen Funktionen

Zusätzliches Touchdisplay für WAS SanSafe System

Rückfahrkamera mit Bildschirm

Der neue WAS 500: Setzt neue Maßstäbe in Sicherheit und Technologie.

BESONDERHEITEN

Elektrohydraulischer Ambulanztisch mit WAS Multi-Load Assist System

WAS SanSafe: stationäres Vernebelungssystem sorgt für 100 % sterilen Patientenraum (zusätzlicher Fahrzeugreinigungsprozess)

Der Ausbau wird zu 100 % organic free ausgeführt: keine Risse in den Materialien, kein Keim- und Pilzwachstum

Heißlandtauglichkeit: Kofferaufbau, drei unabhängig voneinander laufende Klimaanlage und speziell ausgelegte Materialien

Die Sandwichplatten des Koffers sind leicht zu reparieren. Der gesamte Koffer kann gewechselt und auf ein neues Fahrgestell gesetzt werden. Dies erhöht die Lebensdauer einer Ambulanz und reduziert die Kosten

Ein aerodynamischer Kofferaufbau in Verbindung mit einem 6-Zylinder-Motor und einer Motorleistung von 258 PS garantieren perfektes Manövrieren auch in kritischen Situationen

BASISFAHRZEUG

Modell	Mercedes-Benz Sprinter
Fahrzeugtyp	524
Motorleistung	190 kW/258 PS
Getriebe	Automatikgetriebe
Radstand	3665 mm
Kraftstoff	Benzin
Zulässiges	5000 kg
Gesamtgewicht	



Funktionelle äußere Zugangsklappen sorgen für eine rasche Entnahme von Material und Ausrüstung.



Die Patiententrage lässt sich leicht in jede gewünschte Position bringen. Das WAS Multi-Load System ist mit allen Standard-Tragen kompatibel.

Das Konzept ist auf andere Fahrzeugtypen übertragbar. Die Ausstattung ist beispielhaft und kann anforderungsgemäß angepasst werden.



Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH | Lingener Straße 1 | 49835 Wietmarschen, Germany
Telefon +49 5925 991-100 | Fax +49 5925 991-602 | info@was-vehicles.com | www.was-vehicles.com